

MANUAL

MEZATOR

FREQ[®]



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Kluczem do pokonania niemal wszystkich dolegliwości i chorób ciała oraz odzyskania zdrowia jest silny system immunologiczny. Dr. Rife opracował ten protokół, aby pomóc wzmacniać układ odpornościowy i pozwolić organizmowi wyleczyć się samemu. Poniższe wytyczne dotyczące korzystania z Protokołu Rife'a zostały opracowane na podstawie osobistych doświadczeń i informacji zwrotnych od użytkowników, sięgających 1931 roku. Każda część ciała ma wpływ na cały organizm. Zrozumienie elektrycznej charakterystyki ciała pomaga pojąć, w jaki sposób współdziałają ze sobą wszystkie układy w organizmie.

Każda komórka ciała współpracuje ze wszystkimi innymi komórkami. Reakcje chemiczne będące efektem przyjmowanego pożywienia powodują powstawanie prądu elektrycznego. Delikatne prądy energii elektrycznej ciała są kluczem do zdrowia, ponieważ pobudzają i kontrolują reakcje chemiczne, dzięki czemu składniki odżywcze odżywiają komórki. Mikropulsowanie lub Elektryzowanie Krwi to najważniejszy element programu.

Niniejsze urządzenie, dr. Rife opracował pierwotnie na podstawie przeprowadzanych przez siebie badań laboratoryjnych w Albert Einstein College of Medicine. Ma ono zasadnicze znaczenie dla Protokołu Rife'a, ponieważ krążenie krwi w naszych ciałach i oczyszczanie krwi z czynników chorobotwórczych jest kluczem do wzmacniania naszych systemów immunologicznych. Rife opracował prostą metodę stosowania mikroprądów.

Poprzez umieszczenie elektrod elektrostymulatora nad tętnicami w nadgarstku – tętnicą promieniową i łokciową – elektrony dostają się do krwi. W tych miejscach, tętnice znajdują się blisko skóry, dzięki czemu elektrony łatwiej wchodzi do krwiobiegu.

MIKROPULSOWANIE – PIERWSZE UŻYCIĘ:

Aby pozwolić organizmowi nadażyć za koniecznością eliminowania odpadów lub toksyn, najlepiej jest stopniowo zwiększać czas użycia – począwszy od około 15 minut na dzień, aż do 2 lub więcej godzin dziennie.

Stosuj mikropulsowanie przez:

- 2 lub więcej godzin dziennie.
- Kontynuuj terapię przez minimum 8 do 12 tygodni.

UŻYTKOWANIE CIĄGŁE:

Po pierwszym użyciu, ustal dla siebie roczny program mający na celu utrzymanie korzystnych efektów wprowadzania mikroprądów do krwi. Zastanów się, jaki program ciągłego użytkowania najlepiej ci odpowiada.

Możesz na przykład stosować dwugodzinne mikropulsowanie przez:

- a) 2 dni w tygodniu,
- b) 1 tydzień w miesiącu,
- c) 1 miesiąc dwa razy do roku.

ZALECENIA:

- W celu zapewnienia ciątu możliwości wyeliminowania nadmiaru szkodliwych substancji podczas mikropulsowania, wypijaj kilka szklanek wody dziennie.
- Jeśli zamierzasz przerwać terapię mikropulsowaniem,

zawsze lepiej jest stopniowo zmniejszać czas użycia, niż nagle zredukować go do zera.

WSKAZÓWKI:

Jak mikropulsowanie odczuwane jest przez organizm?

Wrażenie podczas stosowania terapii to delikatne brzęczenie i uczucie nacisku. Nie musisz używać urządzenia na najwyższym poziomie mocy. Zamiast tego, dopasuj intensywność do poziomu, który jest dla Ciebie komfortowy. Na wyższych poziomach może wystąpić drżenie palców – jest to normalny efekt. Z czasem możesz zacząć odczuwać przepływ prądu z mniejszą intensywnością, więc zwiększenie mocy urządzenia może okazać się niezbędne. Jeśli w ogóle nie czujesz przepływu prądu, powodem może być niski poziom nawodnienia organizmu. Upewnij się, że pijesz dużo wody podczas stosowania Protokołu Freq. Ograniczenia żywieniowe: Nie ma **ŻADNYCH** ograniczeń żywieniowych.



Korzyści zdrowotne wynikające z mikropulsowania są naturalnie wzmacniane dzięki właściwemu odżywianiu. Osiągamy lepszy stan zdrowia, gdy jemy tak zdrowo, jak to tylko możliwe – konsumując więcej produktów świeżych, niż przetworzonych lub sztucznych. Zdrowy rozsądek jest najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji, co jeść podczas stosowania urządzenia mikropulsującego. Podczas korzystania z urządzenia mikropulsującego, można przyjmować różnorodne suplementy diety i zioła.

Jeśli nie masz pewności co do konkretnego zioła lub suplementu, skonsultuj się ze specjalistą medycyny naturalnej.



**MINI ELEKTRODY
NA NADGARSTEK**

**KLIPSY NA USZY
DO ELEKTRYZOWANIA
MÓZGU**

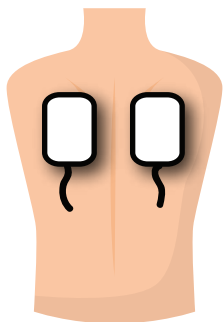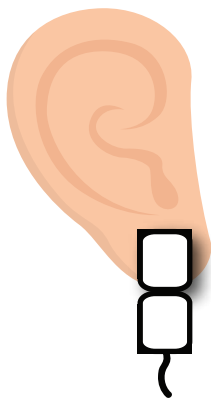

**DUŻE ELEKTRODY
DO STOSOWANIA
MIEJSCOWEGO**